

RELAX MASTER マッサージチェア

AS-691

コンパクトサイズに充実機能、  
さらに想像以上のもみ心地。


詳しくは製品サイトへ

高級感のある  
オーナメント

## 6つ玉のもみ玉とエアーマッサージでしっかり全身ケア

部位に合わせてもみ技が変化する  
GRIP式メカ3.0+ (プラス)


6つのもみ玉が、肩はつかんでほぐす、背中では広範囲に、腰は深く、お尻は下部まできめ細かくマッサージします。また滑らかなもみ心地の「360度回転もみ玉」、背すじのカーブに沿った「S字フィットフレーム」を搭載。

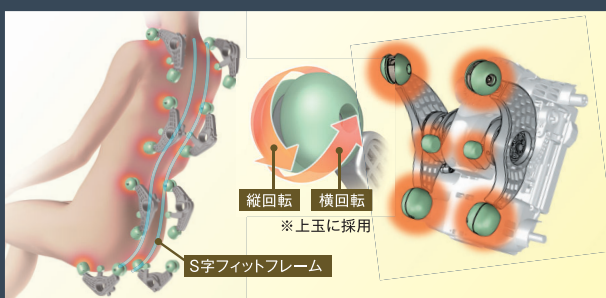

疲れが溜まりがちな骨盤まわりをしっかりほぐす

## NEW 大型腰横エアバッグ

腰横に大型エアバッグを搭載、骨盤まわりの筋肉を包み込むようにもみほぐしたり、もみ玉とあわせてマッサージすることでしっかりと疲れをほぐします。

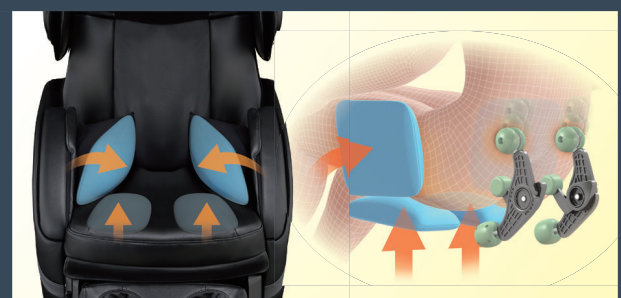




# 想像以上の機能でより進化したマッサージ体験

## MECHANICAL MASSAGE

身体にフィットする滑らかな「メカマッサージ」

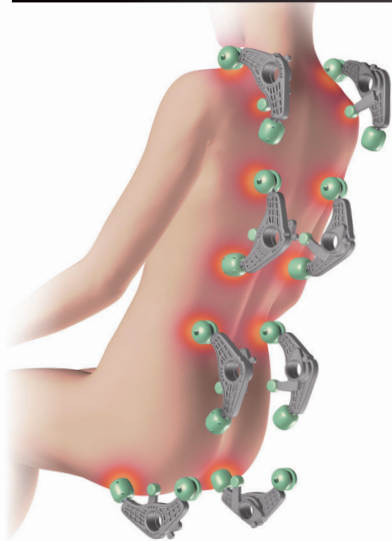

6つのもみ玉が部位ごとに多彩なもみ心地を実現しました。

### 5種類の専用技

首ほぐし 肩ハード 肩甲骨  
腰ハード 尻ほぐし

### 4種類の自動コース

全身 肩 腰 ストレッチ

適切なポイントでマッサージ

肩位置自動検出&  
プログラムフィードバック

お好みの強さが選べる

部位別強弱調節機能

## AIR MASSAGE

全身が包まれるような贅沢な「エアーマッサージ」



22個の  
エアークッション

### 肩ぐう

肩から二の腕までを  
しっかりマッサージ

### 腕部

ひじ下から手まで  
しっかりマッサージ

### 骨盤

骨盤まわりの筋肉を  
心地よくほぐす

### ふくらはぎ&足裏

ひざ下から足先まで  
包み込むようにほぐす

優れた収納機能

反転式フットレスト  
脚部収納機能



背中と足裏をポカポカ温める

温浴背ヒーター 独自機能  
足裏ヒーター



設定温度  
約43℃

ひっぱり伸ばしてすっきり

ストレッチコース  
フットストレッチ



※設定温度と体感温度は異なります。

## 仕様

### リラクスマスター マッサージチェア AS-691

メーカー希望小売価格：オープン価格

#### 【商品仕様】

- 本体寸法:  
(脚部収納時)幅 約69cm×奥行 約107cm×高さ 約107cm  
(脚部最大使用、リクライニング時)幅 約69cm×奥行 約181cm×高さ 約83cm
- リクライニング角度:約118~150度
- 質量:約61kg
- 電源:AC100V(50/60Hz)
- 消費電力:141W(ヒーターのみ40W)
- 定格時間:20分(オートタイマー:約15分)
- 医療機器認証番号:229ABBZX00051A02  
(家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)




ブラック(BK)

【脚部収納時】

JANコード:4951704171687

## 寸法

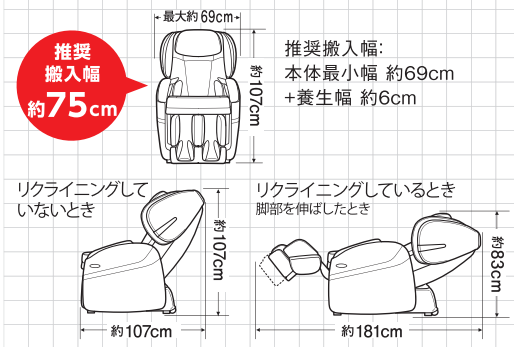

## 使用目的または効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。

- 疲労回復 ●血行をよくする ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のこりをほぐす ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

⚠ 安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。●医師からマッサージを禁じられている人(例:血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈リゅう(瘤)、急性静脈リゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)■次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人●悪性しゅよう(腫瘍)のある人●心臓に障害のある人●妊娠中、または出産直後の人●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人●皮膚に創傷のある人●安静を必要とする人●体温38℃以上(有熱期)の人(例:急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき)●骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性[とう(疼)痛性]疾患の人●背骨(脊椎)に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人●捻挫、肉離れなど炎症性の人●椎間板ヘルニア症の人●腱鞘炎の人●温度感覚喪失が認められる人●その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人■お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

ご使用にあたって ◎この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店が所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。  
◎この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

## お客様相談窓口のご案内

フジ医療器フリーダイヤル ☎ 0120-027-612 受付:平日9:00~17:30(土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

Web [www.fujiiryoki.co.jp](http://www.fujiiryoki.co.jp)  
フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。

FAX番号 06-4793-0818

Web・FAXでの受け付けは24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

## ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

フジ医療器製品の消耗品・別売品のお取寄せはコチラ!

フジ医療器オンラインショップ [www.fujiiryoki.shop](http://www.fujiiryoki.shop)

●お求めは...